


Leading
manufacturer of
HIGH QUALITY
medical device



SURGERY

EVD BAG

EVD 백 본 제품은 chamber가 있는 것 과 없는 것으로 구분하여 생산되며, chamber를 통하여 매시간마다 배액량을 확인할 수 있도록 개발되었다. 또한 Circuit의 높낮이를 쉽게 조절할 수 있도록 눈금자 및 조절끈을 부착하여 시술자의 사용이 편리하고 안전하며, 끝부분 3-way extension라인이 Silicone튜브로 처리되어 착용이 편리하도록 되어있다.

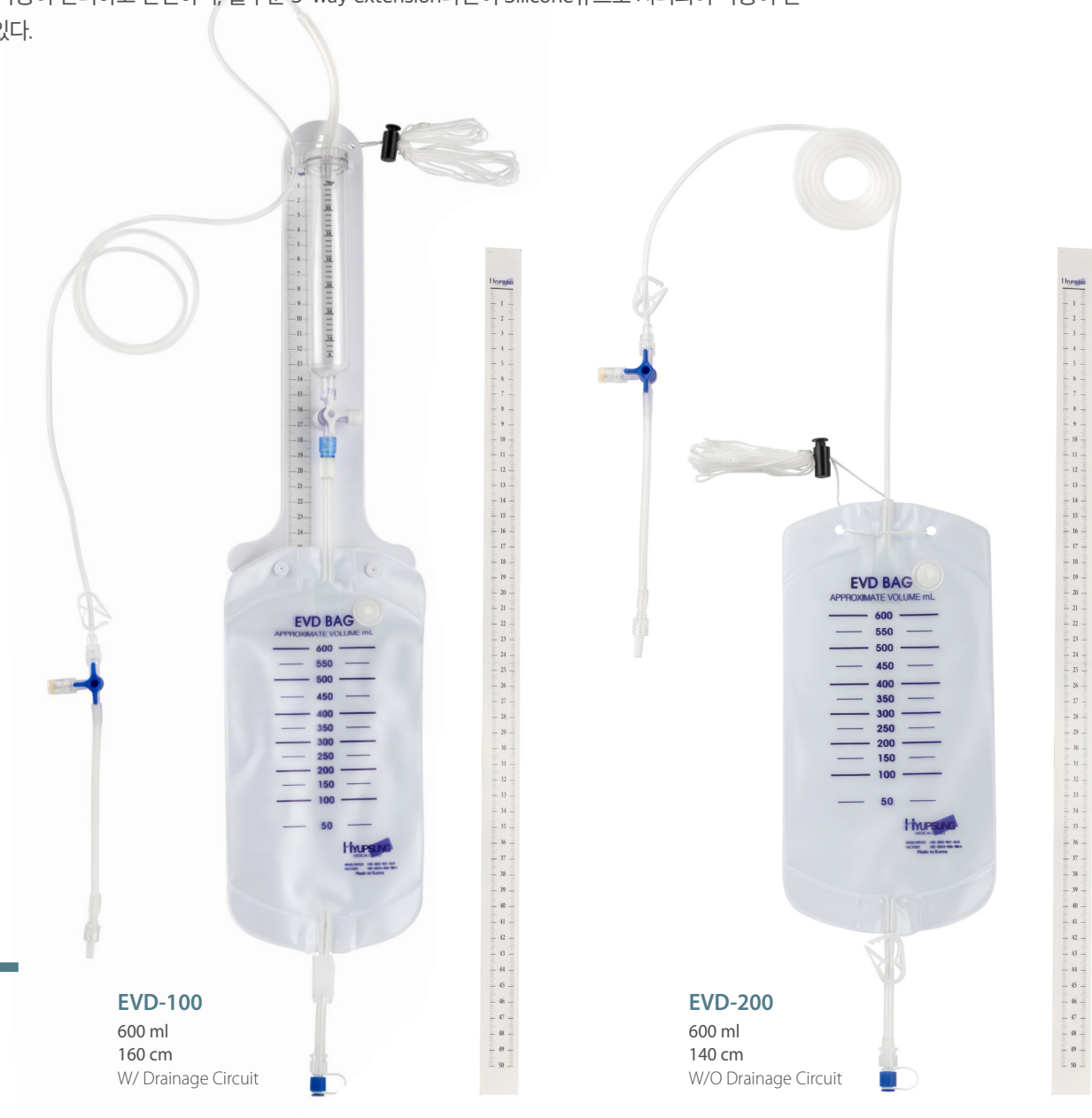


EVD CATHETER

EVD 카테터는 SingleLumen으로 다양한 사이즈로 제작되고 자사의 자체 코팅방법을 이용하여, 정전기 및 끈적거림을 최소화하여 표면이 부드럽게 되어있다. 또한 텅스텐(tungsten) X-ray라인이 있어 언제든지 catheter의 위치를 확인할 수 있으며, 시술자의 사용이 용이하도록 다양한 액세서리(Accessory)를 구성하고 있다.



EVD
9.0FR
10
900 mm

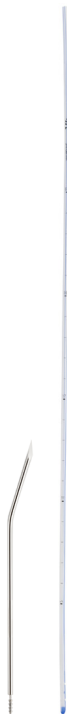


EVD
7.5FR
10
900 mm




EVD
10.5FR
6
900 mm



EVD
12.0FR
8
900 mm

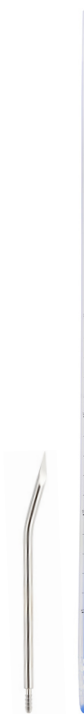

EVD
13.5FR
8
900 mm

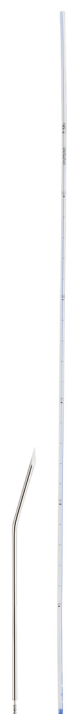

EVD
15.0FR
8
900 mm



Code No.

Size (FR)



Lateral Eyes

Length (mm)



C.V.P MONITORONG TRAY

Spinal Manometer는 뇌척수액의 압력을 검사하기 위해 요추에 needle을 삽입하여 사용하는 기구로써 일체형 과 분리형으로 생산 공급되며 시술자가 쉽게 식별 할 수 있도록 2mm단 위로 표시되어 있어 정확한 뇌척수압의 측정이 가능하다. 뇌척수에 SPINAL NEEDLE을 삽입하여 3-Way Stopcock 과 MANOMETER를 연결한 후 척수가 효율적으로 흘러들어 갈 수 있도록 3-Way Stopcock을 열어 압력이 올라가는 것을 측정하는 기구이다.

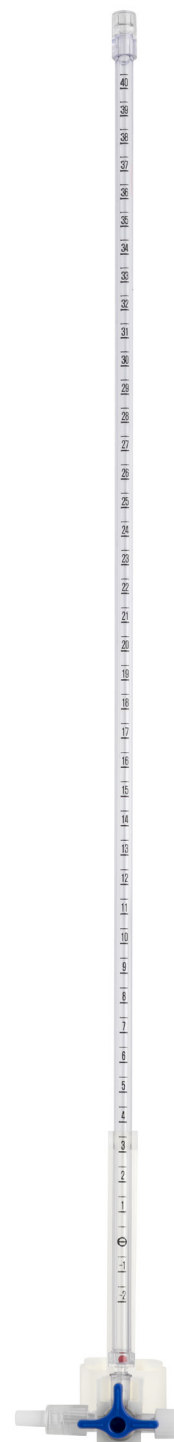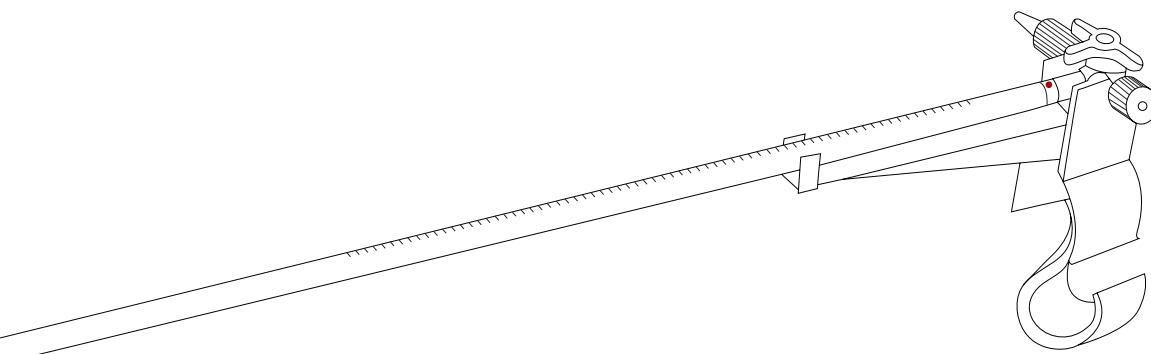


Also Available

Code No.	Length (mm)	Details (mm)	Remarks
SM-100	560		All-In-One
SM-200	410	200 + 210	Separated Type
SM-300	550	160 + 380	Separated Type For oversea

CENTRAL VENOUS CATHETER

이 제품은 생체적응력(Bio-Compatibility)과 부작용을 최소화하도록 축적된 기술과 신소재로 결합, 제작되었으며 용도는 중심 정맥압 (Central Venous Pressure) 측정과 TPN, 혈액채취, 약물주입 등으로 사용된다. 내부 Hole의 숫자에 따라 Single, Double, Triple Lumen으로 구분되었고, 일회용이며 E.O(Ethylene Oxide) Gas로 멸균 처리되었다.

- ▶ 카테타의 끝을 부드럽고 가늘게 만들어서 혈관 내벽의 손상 (Trauma)을 최소화하였음
- ▶ Guide Wire를 한 손으로 잡고 Insertion을 쉽게 할 수 있는 Side Port가 Syringe 앞에 내장되어 있어서 출혈방지와 혈전 등의 발생 가능성을 줄였다.
- ▶ 기존의 셀딩거 방식(Seldinger Tech)을 한 단계 진보시켜 시술자와 환자의 안정성을 높였다.

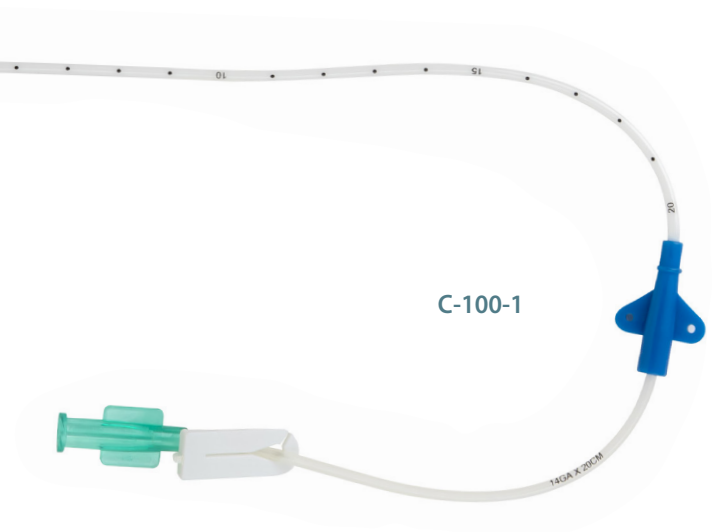


Also Available				J Guide Wire	
Code No.	Lumen	Size (FR)	Tube Length (cm)	Length (cm)	Diameter (")
C-100	Single	7 (12GA)	20/30	60	032
C-100-1	Single	6 (14GA)	20/30	60	032
C-100-2	Single	5 (16GA)	20/30	60	032
C-100-3	Single	4 (18GA)	20/30	40	018
C-100-4	Single	3 (20GA)	20/30	40	018
C-200	Double	7 (18GA/14GA/18GA)	20/30	60	032
C-200-1	Double	5 (18GA/16GA)	20/30	40	018
C-300	Triple	7 (18GA/14GA/18GA)	20/30	60	032
C-300-1	Triple	5.5 (18GA/16GA/18GA)	20/30	40	018

CENTRAL VENOUS CATHETER

C-200 (Double 7Fr/20cm)

C-300 (Triple/7Fr/20cm)

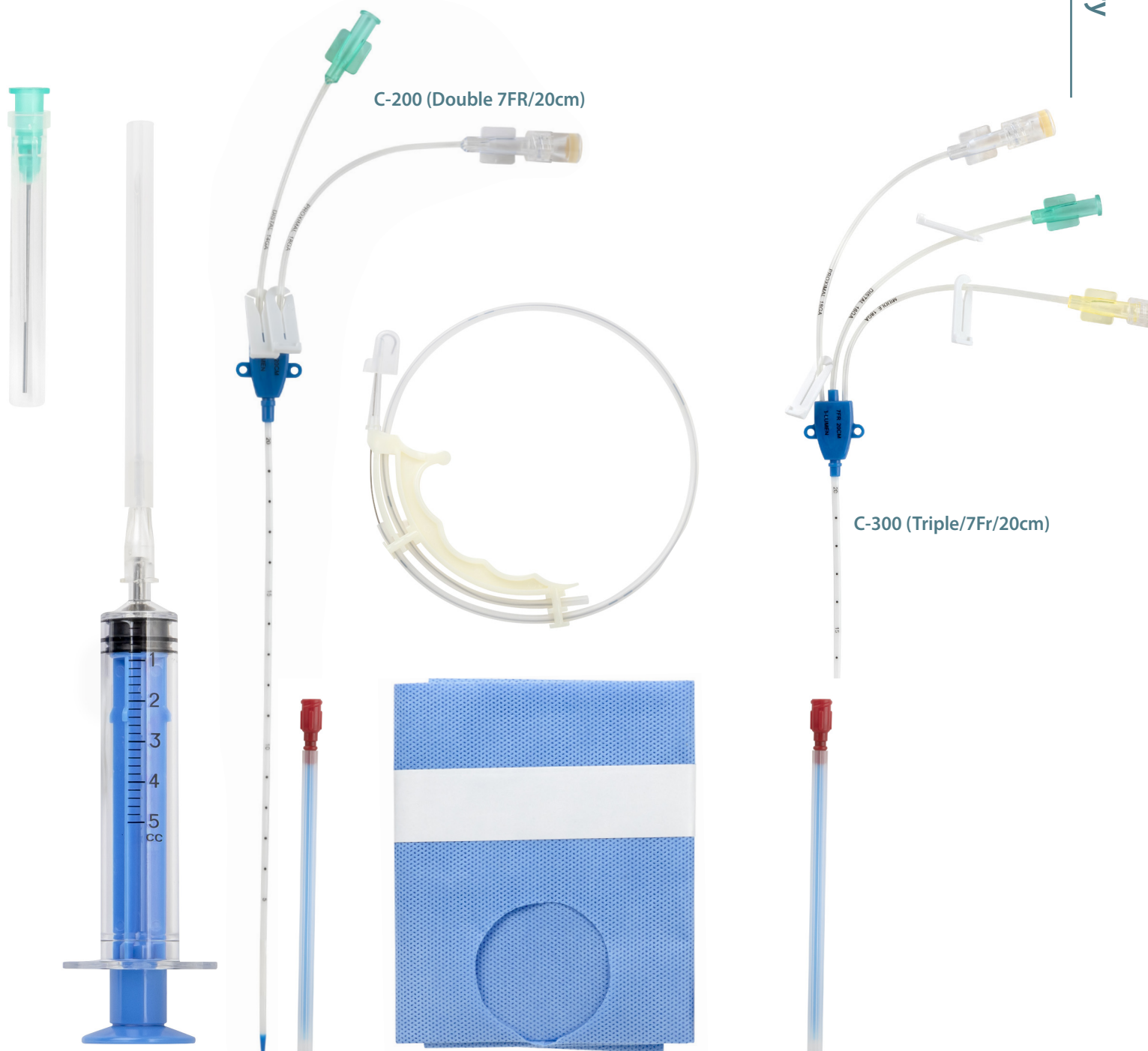

HEMO CATHETER

혈액투석 카테타는 혈액투석 동정맥루를 아직 사용할 수 없는 신부전증 환자의 혈액투석을 위해 독성물질을 제거 해야 할 급성신부전증의 환자들에게 꼭 필요한 Catheter이며 환자와 의료진의 편리성을 고려하여 만들었다. 이 제품은 일회용 의료 소모품이며 E.O(Ethylene Oxide)Gas로 멸균 처리됐다.

- ▶ 혈관 내 이물질로 발생되는 혈전증을 방지하기 위한 재질로 고안
- ▶ 카테타의 튜브로 혈액 통과 시 응고 현상을 방지 할 수 있는 제품의 고안
- ▶ 혈관손상을 예방하기 위한 카테타 TIP이 부드러운 재질이며 Tappered로 처리
- ▶ 혈액투석을 용이하게 하여 환자의 불편을 완화할 목적으로 특수 고안된 Needle 개발

Code No.


Size (FR)

Lateral Eyes

Length (mm)



HEMO CATHETER

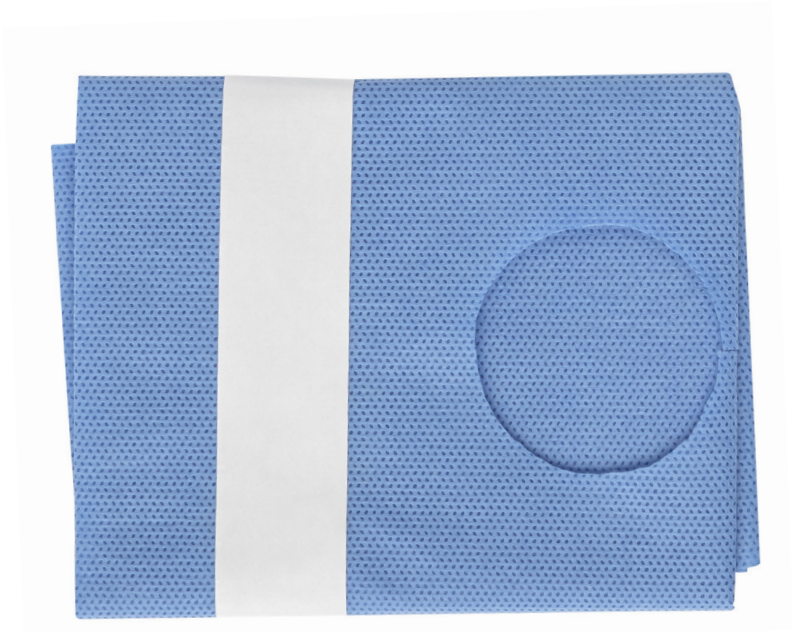

HE-100-ST(12F15CM)

Also Available						
Code No.	Lumen	Size (FR)	Tube Length (cm)	J Guide Wire		Remarks
				Length (cm)	Diameter (")	
HE-100	Double	12	16	60	0.35	Straight
HE-101	Double	12	20	60	0.35	Curved
HE-200	Double	10	16	60	0.35	Straight
HE-201	Double	10	20	40	0.35	Curved
HE-300	Single	10	20	40	0.35	Straight
HE-400	Single	12	20	60	0.35	Curved


SPINAL MANOMETER

Spinal Manometer는 뇌척수액의 압력을 검사하기 위해 요추에 needle을 삽입하여 사용하는 기구로써 일체형 과 분리형으로 생산 공급되며 시술자가 쉽게 식별 할 수 있도록 2mm단위로 표시되어 있어 정확한 뇌척수압의 측정이 가능하다. 뇌척수에 SPINAL NEEDLE을 삽입하여 3-Way Stopcock 과 MANOMETER를 연결한 후 척수가 효율적으로 흘러들어 갈 수 있도록 3-Way Stopcock을 열어 압력이 올라가는 것을 측정하는 기구이다

Also Available			
Code No.	Length (mm)	Details (mm)	Remarks
SM-100	560		All-In-One
SM-200	410	200 + 210	Separated Type
SM-300	550	160 + 380	Separated Type For oversea

SM-200
410 mm
200 + 210 mm
Separated Type

SM-100
560 mm
All-In-One

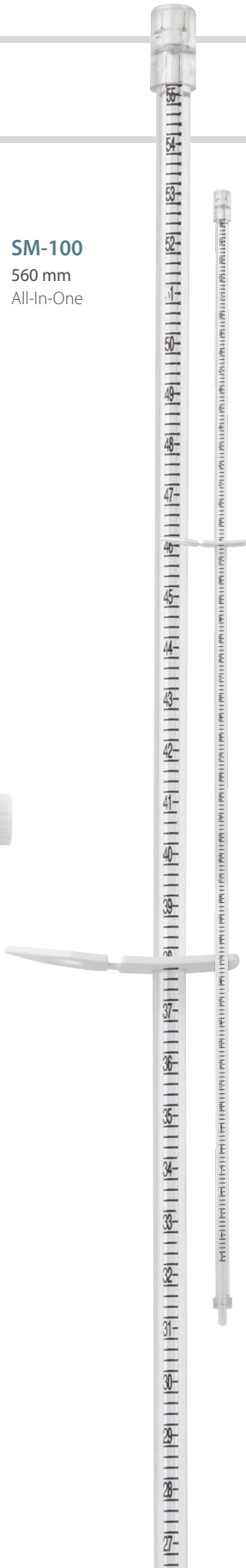

Code No.

Size (FR)
Lateral Eyes
Length (mm)

ENEMA GUIDE

이 제품은 위소매 절제 시 환자의 입을 통해 삽입되는 기구로, 부기 가이드로 위의 위치와 크기를 확인하여 수술 부위에 사용한다.

부기 삽입 시 식도나 위에 천공되지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다.



